

成毛ソラココットンは、管理医療機器・クラスIIの認証を受けた医療機器です。
 一般的名称：人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具

Thoraco Cotton

ナルケ

成毛ソラココットン 脆弱な組織にやさしい綿棒 剥離や止血・小開創においても術野の展開に有用

2重圧縮タイプ ●先端の綿球部を2重圧縮し、水分を含んだときの膨張をおさえています。



成毛ソラココットン 小2 K70-8102
 サイズ 全長約303mm A:約24mm B:約φ5.6mm C:約279mm D:約φ3.2mm


4重圧縮タイプ ●先端の綿球部はさらにきつく圧縮しているため、水分を含んでも膨張しにくくなっています。



寸法は±10%の許容をもつ


成毛ソラココットンの用途例

剥離

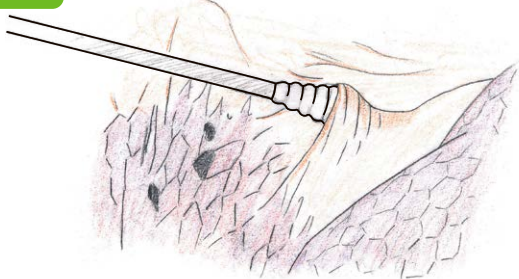


ソラココットンを使って血管などを剥離する

止血

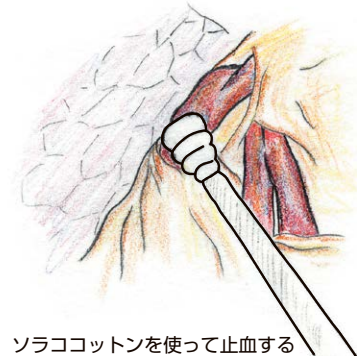


ソラココットンを使って止血する

圧排

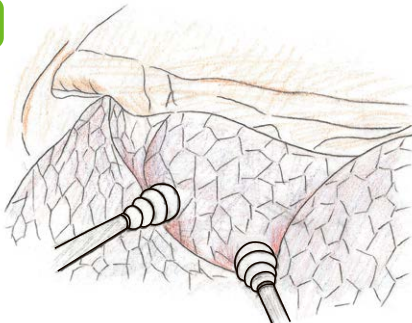

ソラココットンを使って圧排する

視野の確保

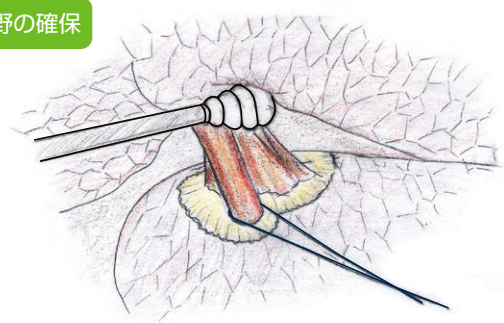

ソラココットンを使って視野を確保する

製品名	製品番号	JANコード	包装	備考	標準小売価格(税別)	認証番号
成毛ソラココットン 大2	K70-8101	4582105371118	5本×10	EOG 滅菌済	¥5,400	306AGBZX00073000
成毛ソラココットン 小2	K70-8102	4582105371125			¥4,400	
成毛ソラココットン 大4	K70-8105	4582105371132			¥7,000	
成毛ソラココットン 小4	K70-8106	4582105371149			¥5,700	
成毛ソラココットン 細4	K70-8108	4582105371156			¥6,500	

※器械店にサンプルの依頼をお願いします。

注)成毛ソラココットンは単独では使用せず、必ず成毛式コットンフィンガーまたは成毛式エンドフィンガーと併用ください。

製造販売業者 リバテープ製薬株式会社
 販売業者 ケンツメディコ株式会社



Cotton Finger / Endo Finger


成毛ソラコ Cotton のシャフト(軸)部分の強化用パイプ

ナル ケ シキ

成毛式コットンフィンガー 22cm長 K70-7111 全長約220mm 外径約φ4.8mm 内径約φ4.2mm(凹部内径約φ2.9mm) 凹部は3ヶ所



↑成毛ソラコ Cotton 大4

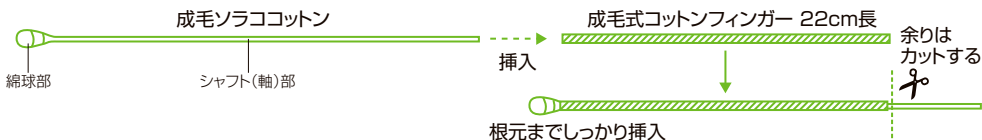

注)曲がったフィンガーを使用すると、挿入したソラコ Cotton が抜けなくなる恐れがあります。


ナル ケ シキ

成毛式エンドフィンガー 35cm長 K60-7121 全長約350mm 外径約φ4.8mm 内径約φ4.2mm(凹部内径約φ2.9mm) 凹部は3ヶ所



↑成毛ソラコ Cotton 大4

↑凹部

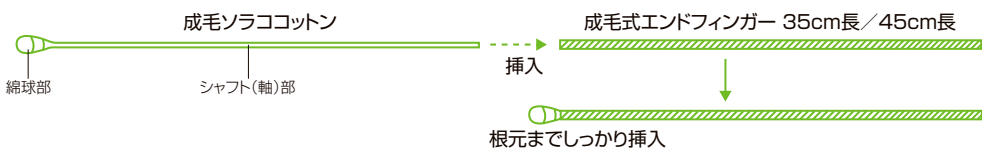

注)曲がったフィンガーを使用すると、挿入したソラコ Cotton が抜けなくなる恐れがあります。

仕上げ加工

両端に内側への曲げ加工を施し、ソラコ Cotton の安定化をはかるとともに医療従事者の安全性を考えた構造になっています。

パイプに3か所凹部を付けソラコ Cotton が抜けにくい構造になっています。



成毛式エンドフィンガー / 成毛式コットンフィンガー

製品名	製品番号	JANコード	包装	備考	標準小売価格(税別)	届出品目番号
成毛式コットンフィンガー 22cm長	K70-7111	4582105370388	5本	未滅菌	¥12,000	11B2X00021708001
成毛式エンドフィンガー 35cm長	K60-7121	4582105370395	5本	未滅菌	¥13,800	11B2X00021708003
成毛式エンドフィンガー 45cm長	K60-7131	4582105370883	3本	未滅菌	¥13,800	11B2X00021708003

滅菌方法:成毛式コットンフィンガー・エンドフィンガーは、使用前に日本薬局方の一般試験法の高圧蒸気滅菌またはEOガス滅菌により滅菌してください。

※器械店にデモ機の依頼をお願いします。

製造販売業者 ケンツメディコ株式会社

ケンツメディコ株式会社

〒367-0206 埼玉県本庄市児玉町共栄552番地1
TEL (0495) 71-1001 FAX (0495) 72-6716
URL <https://www.kenzmedico.co.jp>



ホームページ
成毛式手術器具